

Cavex Boil&Bite

Description

Cavex Boil&Bite is a double-sided thermoplastic ("boil & bite") tray which serves as upper and lower individual tray at the same time.

Packaging

8 x Cavex Boil&Bite / box

Composition

Cavex Boil&Bite is manufactured from a food grade PE copolymer compound with a hardness of 86 Shore A.

Indications for use

Tooth whitening, conditioning, desensitizing or fluoride application.

Handling procedure

- Bring some water to the boil.
- Place the Cavex Boil&Bite in a suitable (heat-resistant) glass.
- Add enough water to the Cavex Boil&Bite to cover the tray - with the exception of the handle.
 - Leave the unit submerged in the water for one minute.
- Carefully remove the Cavex Boil&Bite from the hot water.
- Shake off any surplus water.
- Put the Cavex Boil&Bite into your mouth immediately and adjust the shape of the tray by pressing it firmly against the teeth with your fingers. Do this for both the top and bottom teeth.

Contra-Indications

None.

Warnings & first aid instructions

Hot (boiling) water can cause burns.

Storage advice

Store in a cool place, dry place and protected from direct sunlight.

Made in The Netherlands

Our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. It does not release you from the obligation to test the products supplied by us as to their suitability for the intended process and uses. The application, use and processing of the products are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Should, in spite of this liability be established for any damage, it will be limited to the value of the goods delivered by us and used by you. We will, of course, provide consistent quality of our products within the scope of our General Conditions of Sale and Delivery.

Cavex Boil&Bite

Omschrijving

Cavex Boil&Bite is een dubbelzijdige thermoplastische ("boil & bite") tray, die tegelijkertijd dient als individuele boven- en ondertray.

Verpakking

8 x Cavex Boil&Bite / doos

Samenstelling

Cavex Boil&Bite wordt vervaardigd van een Food Grade PE-copolymercompound met een hardheid van 86 Shore A.

Indicaties voor gebruik

Whitening, conditioneren en desensibiliseren van tanden of fluorbehandelingen.

Verwerkingsprocedure

- Breng water aan de kook.
- Plaats de Cavex Boil&Bite in een geschikt (hittebestendig) glas.
- Voeg voldoende water aan de Cavex Boil&Bite toe, zodat de tray - met uitzondering van de handgreep - is ondergedompeld. Laat het geheel 1 minuut in het water staan.
- Haal de Cavex Boil&Bite voorzichtig uit het water.
- Overtoollig water afschudden.
- Plaats de Cavex Boil&Bite meteen in de mond en pas de vorm van de tray aan door deze met je vingers goed tegen de tanden te drukken. Doe dit voor boven en onder.

Contra-Indicaties

Geen.

Waarschuwingen & instructies voor eerste hulp

Heet (kokend) water kan brandwonden veroorzaken.

Bewaaraadvies

Bewaren op een koele, droge plaats, afgeschermd van direct zonlicht.

Geproduceerd in Nederland

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedé's en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelikheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Cavex Boil&Bite

Description

Cavex Boil&Bite est une gouttière individuelle thermoplastique double face de type « boil & bite » qui sert à la fois pour les arcades supérieures et inférieures.

Conditionnement

8 x Cavex Boil&Bite / boîte

Composition

Cavex Boil&Bite est fabriqué à partir d'un composé copolymère PE de classe alimentaire d'une dureté Shore A de 86.

Indications d'utilisation

Blanchiment dentaire, conditionnement, désensibilisation ou application de fluorure.

Procédure d'utilisation

- Faites bouillir de l'eau.
- Placez la gouttière Cavex Boil&Bite dans un verre approprié (résistant à la chaleur).
- Ajoutez une quantité d'eau suffisante pour couvrir la gouttière Cavex Boil&Bite mais pas la poignée. Laissez la gouttière dans l'eau bouillante pendant une minute.
- Retirez avec précaution la gouttière de l'eau bouillante.
- Secouez l'excédent d'eau.
- Placez immédiatement le Cavex Boil&Bite dans la bouche et adaptez avec les doigts la forme de la gouttière aux dents supérieures et inférieures.

Contre-Indications

Aucune.

Avertissements et instructions de premiers secours

L'eau chaude (bouillante) peut causer des brûlures.

Conseils de conservation

À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri des rayons du soleil.

Fabriqué aux Pays-Bas

Nos conseils techniques qu'ilis soient verbaux, écrit ou dans le cadre d'essais, n'engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de tester nos produits pour assurer qu'ils conviennent à vos procédés et applications. L'utilisation, la mise en oeuvre et la transformation des produits fournis échappent à notre contrôle et relèvent, dès lors, de votre entière responsabilité. Si notre responsabilité devait néanmoins se trouver engagée, elle se limiterait, pour tous les dommages, à la valeur de la marchandise fournie par nous et utilisé par vos soins. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison.

Cavex Boil&Bite

Beschreibung

Cavex Boil&Bite ist eine doppelseitige thermoplastische („Boil&Bite“) Schiene, die gleichzeitig als einzelne obere und untere Schiene dient.

Verpackung

8 x Cavex Boil&Bite / Packung

Zusammensetzung

Cavex Boil&Bite wird aus einem lebensmittelverträglichen PE-Copolymergemisch mit einer Härte von 86 Shore A hergestellt.

Angaben zur verwendung

Wird zum Aufhellen, Desensibilisieren bei Überempfindlichkeiten der Zähne oder zur Fluoridanwendung verwendet.

Anwendungsvorfahren

- Wasser zum Kochen bringen.
- Legen Sie die Cavex Boil&Bite in ein geeignetes (hitzebeständiges) Glas.
- Geben Sie ausreichend Wasser zum Cavex Boil&Bite hinzu, so dass sich die Schiene - mit Ausnahme des Griffes - unter Wasser befindet. Lassen Sie die Schiene 1 Minute im Wasser liegen.
- Nehmen Sie das Cavex Boil&Bite vorsichtig aus dem Wasser heraus.
- Schütteln Sie überschüssiges Wasser ab.
- Bringen Sie das Cavex Boil&Bite sofort im Mund an und richten Sie die Schiene aus, indem Sie sie mit den Fingern gut gegen die Zähne drücken. Tun Sie das für die oberen und unteren Zähne.

Gegenanzeigen

Keine.

Warnungen und anweisungen zur ersten Hilfe

Heißes (kochendes) Wasser kann zu Verbrennungen führen.

Aufbewahrungsempfehlung

An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Hergestellt von Cavex Holland BV

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten Ware beschränkt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Cavex Boil&Bite

Descrizione

Cavex Boil&Bite è un portaimpronta termoplastico doppio (boil & bite), che serve contemporaneamente come portaimpronta superiore e inferiore.

Confezione

8 Cavex Boil&Bite / scatola

Composizione

Cavex Boil&Bite è prodotto con un composto in copolimero PE di qualità alimentare, con una durezza pari a 86 Shore A.

Indicazioni per l'uso

Sbiancamento, condizionamento e desensibilizzazione dei denti o trattamenti al fluoro.

Modalità di applicazione

- Fare bollire dell'acqua.
- Posizionare il Cavex Boil&Bite in un contenitore di vetro idoneo (resistente al calore).
- Aggiungere una quantità di acqua sufficiente al Cavex Boil&Bite, in modo che il vassoio sia completamente sommerso, ad eccezione del manico. Lasciare riposare tutto per 1 minuto nell'acqua.
- Togliere con cautela il Cavex Boil&Bite dall'acqua.
- Scuotere l'acqua in eccesso.
- Inserire il Cavex Boil&Bite subito in bocca e regolare la forma del portaimpronta premendolo bene con le dita contro i denti superiori e inferiori.

Controindicazioni

Nessuna.

Avvertenze e istruzioni di pronto soccorso


L'acqua calda (bollente) può provocare ustioni.

Conservazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Prodotto nei Paesi Bassi.

La nostra consulenza tecnica, fornita a voce, per iscritto o in maniera dimostrativa è rilasciata in buona fede e senza alcuna garanzia anche per quanto concerne eventuali diritti di proprietà industriali di terzi. Questo non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimarne l'idoneità ai procedimenti e ai fini previsti. L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso tuttavia si esiga una responsabilità, questa sarà limitata, per tutti i danni, al valore dei prodotti da noi forniti e impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo la qualità dei nostri prodotti in conformità alle nostre condizioni generali di vendita e di consegna.

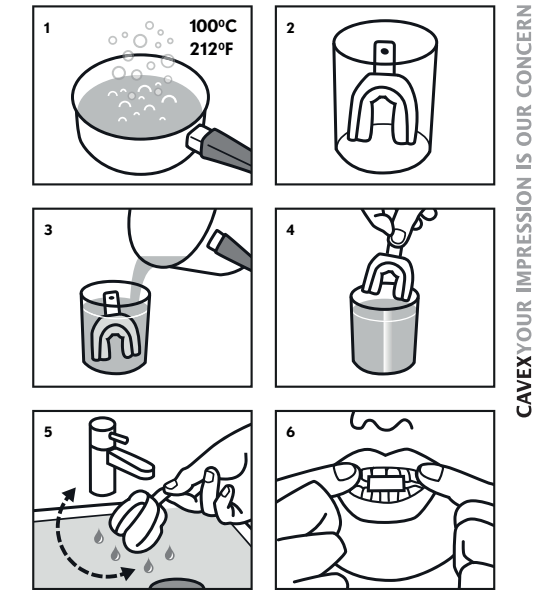

CAVEYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

Cavex Boil&Bite

Descripción

Cavex Boil&Bite es una cubeta termoplástica de doble cara ("boil & bite") que sirve al mismo tiempo de cubeta individual superior e inferior.

Presentación

8 x Cavex Boil&Bite / caja

Composición

Cavex Boil&Bite está fabricado a partir de un compuesto de copolímero de PE de calidad alimentaria con una dureza de 86 Shore A.

Indicaciones de uso

Blanqueamiento dental, acondicionamiento, desensibilización o aplicación de fluor.

Procedimiento de uso

- Lleve el agua a ebullición.
- Coloque el Cavex Boil&Bite en un recipiente de cristal apropiado (resistente al calor).
- Añada suficiente agua al Cavex Boil&Bite hasta que la cubeta, sin el asa, esté sumergida. Deje la cubeta 1 minuto en el agua.
- Saque el Cavex Boil&Bite con cuidado del agua.
- Secuda el agua sobrante.
- Póngase el Cavex Boil&Bite inmediatamente en la boca y ajuste la forma de la cubeta apretándola firmemente con los dedos contra los dientes. Hágalo esto para los dientes superiores e inferiores.

Contraindicaciones

Ninguna.

Advertencias e instrucciones de primeros auxilios

El agua caliente (hirviendo) puede causar quemaduras.

Consejos de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol.

Fabricado en los Países Bajos

Nuestro consejo técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como iniciación sin compromiso, tanto para nosotros como para el cliente. No nos hacemos responsables de los daños que nos exime al cliente del examen de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará para cualquier daño y perjuicio, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Cavex Boil&Bite

Descrição

Cavex Boil&Bite é uma moldeira termoplástica que funciona simultaneamente como moldeira individual superior e inferior.

Embalagem

8 x moldeiras Cavex Boil&Bite / caixa

Composição

A moldeira Cavex Boil&Bite é produzida à partir de um copolímero de PE de qualidade alimentar, com uma dureza Shore A 86.

Indicações de uso

Branqueamento, condicionamento e dessensibilização dos dentes ou tratamentos com fluor.

Procedimento para utilização

- Ferva uma quantidade adequada de água para envolver uma moldeira Cavex Boil&Bite em um aquecedor elétrico ou à gás.
- Colocar Cavex Boil & Bite num recipiente de vidro adequado (resistente ao calor).
- Juntar água suficiente ao Cavex Boil&Bite para que toda a moldeira, com exceção da pega, fique coberta. Deixar repousar durante 1 minuto na água.
- Retirar cuidadosamente o Cavex Boil&Bite da água.
- Secudir a água em excesso.
- Inserir imediatamente o Cavex Boil&Bite na boca e adaptar com os dedos a forma da moldeira aos dentes. Efetuar o procedimento para os dentes superiores e inferiores.

Contraindicaciones

Nenhuma.

Avisos e instruções de primeiros socorros

A água quente (em fervura) pode causar queimaduras. O material utilizado na fabricação da moldeira Cavex Boil&Bite absorverá o calor da água fervente deixando-a macia e resiliente. Quando o produto for utilizado da maneira descrita acima não ocorrerá queimaduras ao usuário.

Conselho de armazenamento

Guardar em local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Fabricado nos Países Baixos

As nossas recomendações relativas à aplicação técnica oral, por escrito ou por meio de ensaios são, segundo os nossos critérios, de confiança, no entanto apenas são válidas instruções/indicaciones para o produto a eventualidades de danos que nos exime de qualquer responsabilidade. Eles não o isentam da obrigação de controlar os produtos que nós lhe fornecemos relativamente à sua respectiva capacidade face aos processos e objetivos em questão. A aplicação, a utilização e a elaboração dos produtos tem lugar fora do nosso campo de controle. Elas são por isso de sua responsabilidade. Em caso de dano, esta última limita-se ao valor dos bens que nós fornecemos e que foram utilizados por si. Naturalmente que garantimos a qualidade dos nossos produtos, em conformidade com os critérios mencionados relativos às nossas condições gerais de venda e de fornecimento.

Vårt tekniska råd, antingen verbalt, skriftligt eller grundat på erfarenhet, har getts i god tro men utan garantier. Detta gäller också där äganderättsförhållanden för tredje part blir aktuella. Det befriar ej er från skyldigheten att testa de produkter som tillhandahålls av oss avseende deras lämplighet för avsedda behandlingar och indikationer. Applikationen, användningen och hanteringen av produkterna ligger utanför vår kontroll och är helt och hållet ert ansvar. Skulle vi trots detta hållas ansvarsskyldiga begransas ansvaret till värdet av det gods som levererats av oss och använts av er. Vi garanterar, naturligtvis, en jämn kvalitet på våra produkter inom ramarna för följande leveransbestämmeiser.

Vores tekniske rådgivning hvad enten den er givet mundtligt, skriftligt eller ved afprøvning af produktet gives i god tro, men er uden garanti. Dette gælder også i tilfælde der involverer tredje parts ejendomsret. Det fritager ikke brugeren for forpligtigelsen til at kontrollere at det produkt, vi har leveret er egnet til de fremgangsårder og anvendelsesområder som det er på-tænkt anvendt til. Da vi ikke har nogen kontrol over anvendelse, fremgangsmåde og behandling af dette produkt, sker brugen helt på brugerens ansvar. Skulle der, på trods af disse ansvarsbetingelser, opstå et retskrav vil dette være begrænset til værdien af produkter leveret af os og anvendt af Dem. Vi vil naturligtvis levere produkter af et ansartet kvalitet inden for rammerne af vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.

