

Unser Prophylaxe- Sortiment




Das größte und umfangreichste Sortiment an Bürsten, Kelchen und Spitzen für die Prophylaxe auf dem Markt.



Polierkerelche

Schäfte

Eine Übersicht zu den Vorteilen jedes benötigten Schafts und Handstücks.

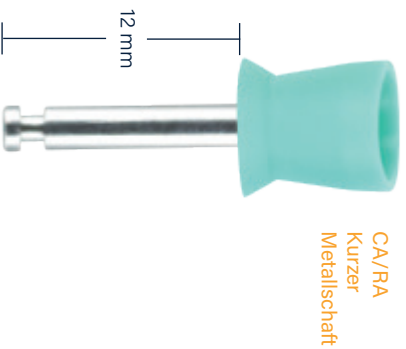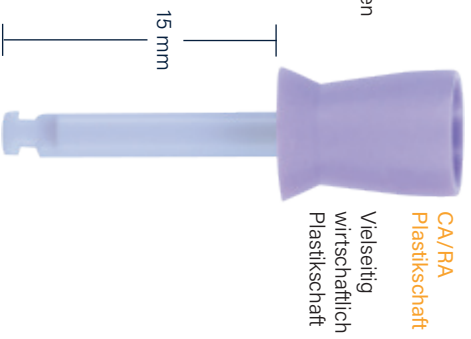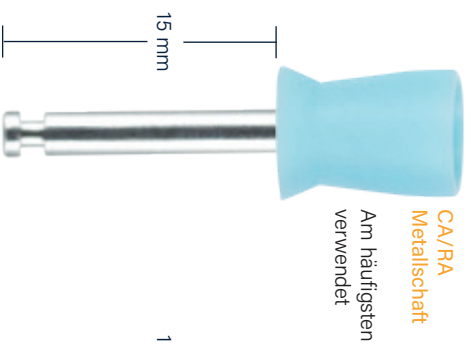

Formen


Unsere Polierkerelche gibt es in regular (normal) soft (weich) x-soft (extra weich)



Gerippter, lamellierter Kelch

Der innere Aufbau hält die optimale Menge an Polierpaste. Unter Druck weitet sich der Kelch in die Breite und ermöglicht so den zielsicheren Zugang zu interproximalen Bereichen.


LATEXFREI

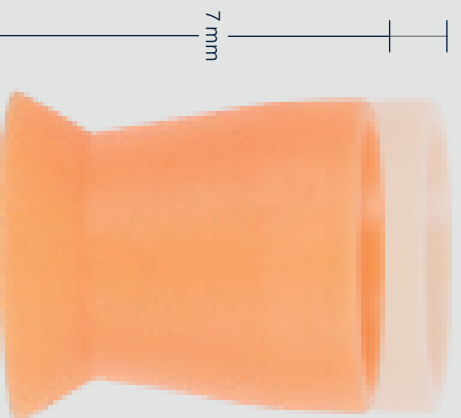

Kurzer Kelch - gerippt und lamelliert

Der kürzere Kelch ermöglicht einen besseren Zugang zur Mundhöhle. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Aufbau, lässt sich die Gesamtgröße mit einem Mini-CA-Handstück, dem kurzen Kelch und einem kurzen Schaft um über 30% reduzieren.

LATEXFREI

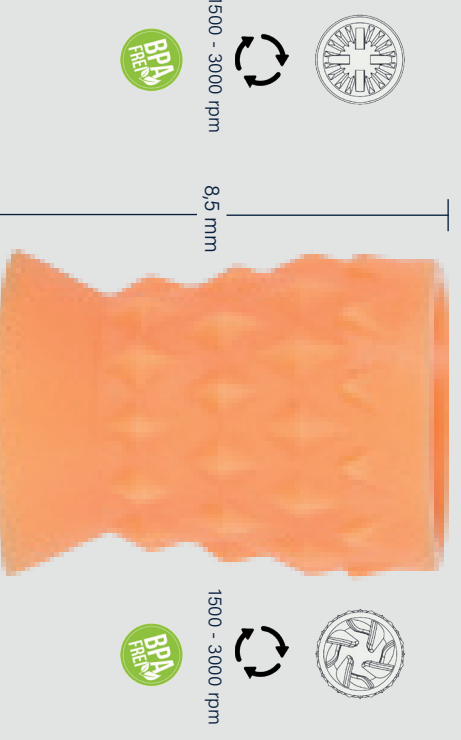

Kelch mit Türbrennschraufel

Die genoppte Außenfläche ermöglicht die optimierte, interdentale Biofilmentfernung und Politur. Zusätzlich entlastet der geringere Druck die Anwender. Dank der Türbrennschraufel bleibt die Paste im Kelch und reduziert die Aspiration.

LATEXFREI

Farben

Die große Farbpalette erleichtert das Erkennen der Härtegrade und bringt Farbe in die Praxis.

Unsere Prophylaxe-Kelche sind in ausgewählten Farben oder bunt gemischt, in Recycling-Verpackungen erhältlich.



Weiß



Hellblau



Pink



Limette



Lavendel



Orange



Grün



Blau



Rot





Gelb

Kelch regular

Kelch soft

Kelch x-soft

1,5 mm kürzerer Kelch

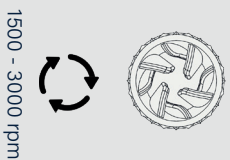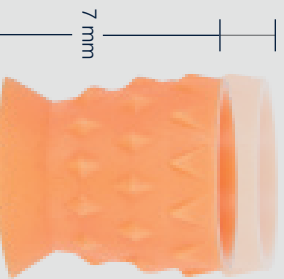


Kurzer Kelch mit Turbinenschautel

Der kürzere Kelch ermöglicht einen besseren Zugang zur Mundhöhle. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Aufbau, lässt sich die Gesamtgröße mit einem Mini-CA-Handstück, dem kurzen Kelch und einem kurzen Schaft um über 30% reduzieren.

LATEXFREI



9,5 mm

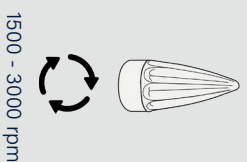

Flexible Flamme (Kieferorthopädie)

Entwickelt für den Zugang zu engen oder schwer zugänglichen Bereichen. Ideal für kieferorthopädische oder parodontale Verfahren, bei denen die Flexibilität das effizienteste Polieren ermöglicht. Die geriffelten Rippen stellen auch Grate bereit, die die effektivste Reinigungs- und Polieroberfläche bieten.

LATEXFREI




Konzipiert zum Aufweiten. Für den Zugang der interproximalen und subgingivalen Bereiche



Einfacher Zugang zu engen Zahnzwischenräumen



Äußere Noppen polieren interproximale und subgingivale Bereiche


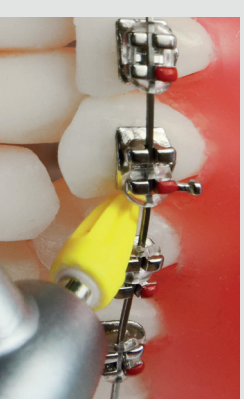


Ideal für die Kieferorthopädie

Prophylaxebürsten


Schäfte

Eine Übersicht zu den Vorteilen jedes benötigten Schafts und Handstücktyps.

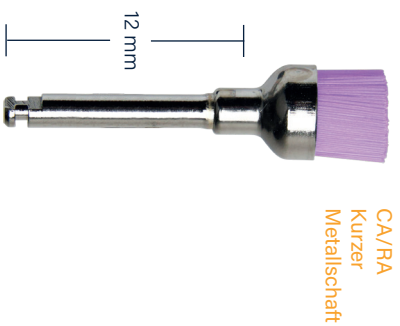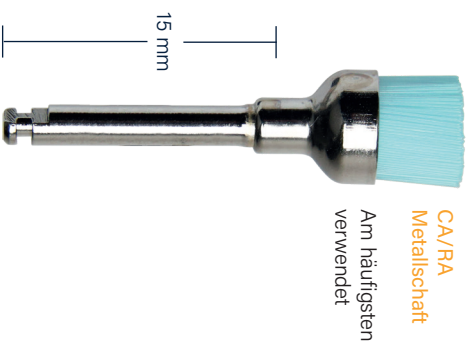

Formen


Welche Form oder Größe wird benötigt?

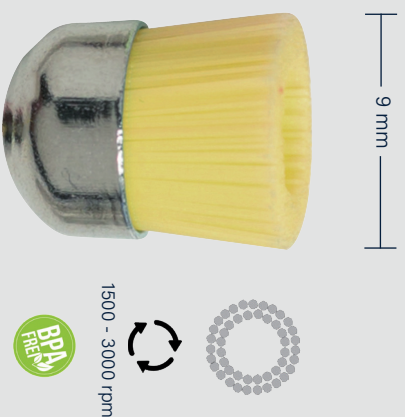

9 mm Junior Bürstenkopf

Unsere Standardbürste mit klassisch geformten Nylonborsten. Die beliebteste Bürste zum Polieren von Zahn-, Gold- und Amalgamfüllungen.

LATEXFREI

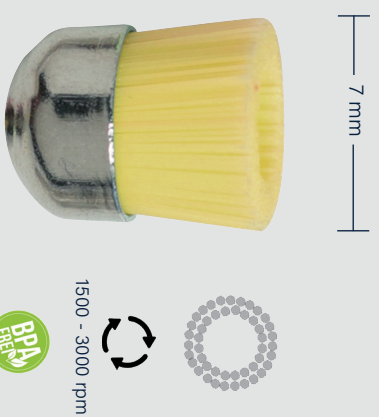

7 mm mini Bürstenkopf

Eine kleinere Version unseres beliebten Junior Bürstenkopfes. Mit allen Vorteilen des Junior Bürstenkopfes aber besserem Zugang zur Mundhöhle.

LATEXFREI



Mikro-Bürste


Die Nylonborsten wurden entwickelt, um Bereiche mit eingeschränktem Zugang zu erreichen und eignen sich perfekt zum Polieren von kieferorthopädischen Apparaturen, Zahnzwischenräumen, Implantaten und Kavitäten.

LATEXFREI

Farben

Die große Farbpalette erleichtert das Erkennen der Bürstenhärte und bringt Farbe in die Praxis..

Extra Soft eignet sich besonders für Arbeiten rund um Implantate.

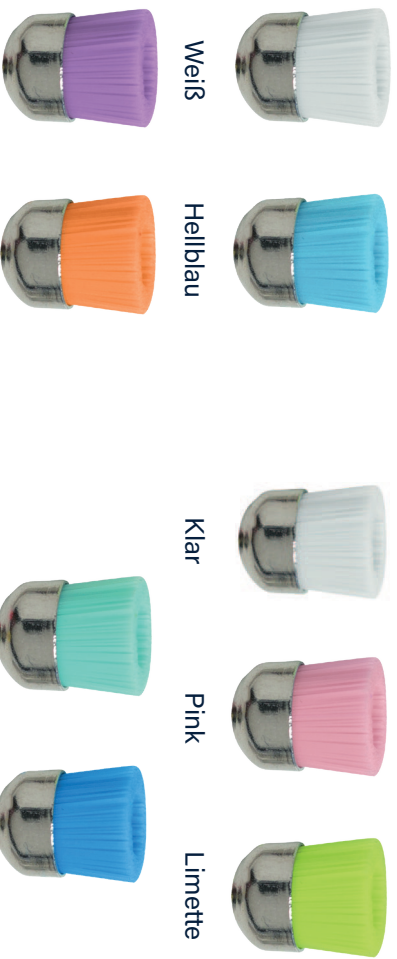

regular

Weiß wird einzeln, die anderen Farben gemischt geliefert.

soft

Transparent wird einzeln, die anderen Farben gemischt geliefert.

extra Soft



1500 - 3000 rpm

Flache Bürsten

Unsere größere Flachbürste für eine größere Abdeckung beim Polieren von Zahn-, Gold- und Amalgamfüllungen.



1500 - 3000 rpm

Bürsten in Torpedoform

Mit unserer sich verjüngenden Bürste, kann man optimal zwischen Implantaten und kieferorthopädischen Apparaturen polieren.



Zum Polieren von Zähnen und Amalgamfüllungen



Die flache Bürste erreicht leicht Oberflächen und Interproximalbereiche



Mikrobürste für den Zugang zu kleinen, schwer zugänglichen Bereichen, die Präzision erfordern



Ideal für die Kieferorthopädie

LATEXFREI



LATEXFREI




Prophy Angles

Vorteile unserer Prophy Angles


Die einzeln verpackten Prophy Angles passen auf die meisten gängigen Handstücke. Da es sich um Einwegwinkelstücke handelt, entfällt die aufwändige Aufbereitung.

360° VS 60° oszillierende Bewegung

Unser Standardsortiment an Prophy Angles ist um 360° drehbar und bietet ein effizientes, wirtschaftliches und sicheres Polieren. Mit den 60° Kelchen wird die Effizienz deutlich gesteigert. Zudem wird die Dispersion von Speichel, Blut und Polierpaste reduziert.

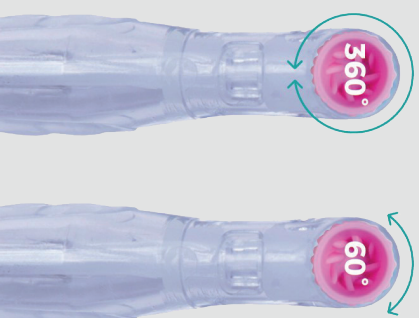

Sie haben die Wahl zwischen einem in 90° und einem in 105° abgewinkelten Kopf. Beide sind ergonomisch gestaltet, um einen komfortablen, ermüdungsfreien Gebrauch zu ermöglichen. Zudem verhindert das präzisionsgefertigte Getriebe Vibrationen.

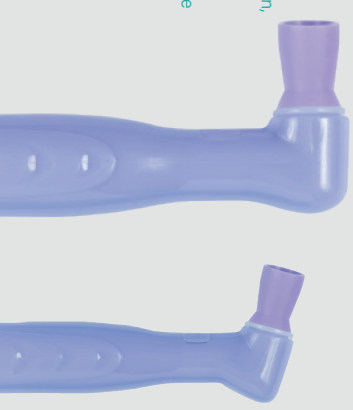

90° VS 105°

60° oszillierende Bewegung

Kelche in einzelnen Farben und bunt gemischt erhältlich.

Bürsten sind einfarbig erhältlich:

regulär = Weiß

soft = transparent

x-soft = Gelb.

Kelch mit
Turbinenschaufel



Kurzer Kelch mit
Turbinenschaufel



Flache Bürsten



Bürsten in
Torpedoform



7mm mini
Bürstenkopf



Die genoppte Außenfläche ermöglicht die optimierte, interdentale Biofilmentfernung und Politur. Zusätzlich entlastet der geringere Druck die Anwender. Dank der Turbinenschaufeln bleibt die Paste im Kelch und reduziert die Asperion.

Der kürzere Kelch ermöglicht einen besseren Zugang zur Mundhöhle. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Aufbau, lässt sich die Gesamtgröße mit einem Mini-CA-Handstück, dem kurzen Kelch und einem kurzen Schaft um über 30% reduzieren.

Unsere größere Flachbürste für eine größere Abdeckung beim Polieren von Zahn-, Gold- und Amalgamfüllungen.

Mit unserer sich verjüngenden Bürste kann man optimal zwischen Implantaten und kieferorthopädischen Apparaturen polieren.

Unsere Standardbürste mit klassisch geformten Nylonboorstien. Die beliebteste Bürste zum Polieren von Zahn-, Gold- und Amalgamfüllungen.



regulär

soft

x-soft

360°

Drehbar

Klar

Unsere meistverkauften
Prophy Angles.


Gerippt, lamellierter Kelch



1500 - 3000 rpm

Der innere Aufbau hält die optimale Menge an Polierpaste. Unter Druck weitet sich der Kelch in die Breite und ermöglicht so den zähsicheren Zugang zu interproximalen Bereichen.

Kurzer Kelch - gerippt und lamelliert

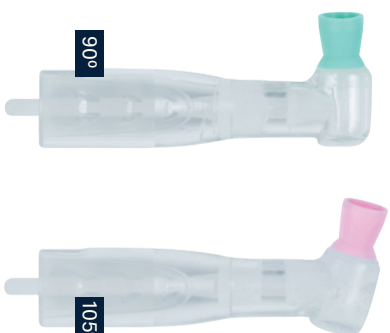

1500 - 3000 rpm

Der kürzere Kelch ermöglicht einen besseren Zugang zur Mundhöhe. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Aufbau, lässt sich die Gesamtgröße mit einem Mini-CA-Handstück, dem kurzen Kelch und einem kurzen Schaft um über 30% reduzieren.


Kelch mit Turbinenschaukel



1500 - 3000 rpm

Die genoppte Außenfläche ermöglicht die optimierte, interdentale Biofilmentfernung und Politur. Zusätzlich entlastet der geringere Druck die Anwender. Dank der Turbinenschaukeln bleibt die Paste im Kelch und reduziert die Asperision.

regulär

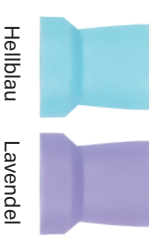

soft



Gerippter, lamellierter Kelch



1500 - 3000 rpm

Unsere wirtschaftlichsten
Prophy Angles

360°

Drehbar

Standard

Dieser Kelch mit vier Stegen und Rippen liefert die optimale Menge an Prophy/latexpaste, um Flecken zu entfernen.

Flache Bürsten



1500 - 3000 rpm

Unsere größere Flachbürste für eine größere Abdeckung beim Polieren von Zahn-, Gold- und Amalgamfüllungen.


Bürsten in Torpedoform



1500 - 3000 rpm

Mit unserer sich verjüngenden Bürste, kann man optimal zwischen Implantaten und kieferorthopädischen Apparaturen polieren.

regulär

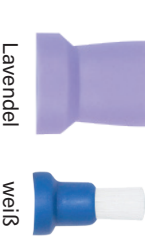

soft



Bürsten nur in regulär / Weiß erhältlich.

Ihr Dentalfachhändler



Deutschland

Dental-Contact Vertriebs KG

Dental- & Medizinhandel

Im Spiet 101

D 26506 Norden

Tel. +49 (0) 4931 9809681

Fax +49 (0) 4931 9809683

info@dental-contact.de

www.dental-contact.de

Österreich

Dental-Contact Vertriebs KG

Dental- & Medizinhandel

Hauptstraße 52

AT 2381 Laab im Walde

Tel. +43 (0)676 4655990

Tax +43 (0)2239 99228

info@dental-contact.at

www.dental-contact.at



Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

© 2023 bei Dental-Contact Vertriebs KG, Deutschland